

脳定位固定装置のバージョンアップ 1

弊社の脳定位固定装置は様々な用途にバージョンアップが出来ます。今回は既にお持ちの脳定位固定装置のバージョンアップ方法をご紹介します。

◆◆ 過去からのバージョンアップ ◆◆

旧タイプであるSR-5/-5N/-6/-6Nを、現行製品であるSR-5M/-5R/-6M/-6Rへバージョンアップ!

既にSR-5/-5N/-6/-6Nをお持ちで、新しい装置を買い換える程の余裕が無くお悩みの場合には、パーツの交換だけでバージョンアップが可能です。

ラット用 → RA-6N

マウス用 → MA-6N

既にお持ちの固定器の頭部アダプターを取り替えるだけでバージョンアップが完了し、ラット/マウスの頭部を今までよりも更に強固/スムーズに固定することが可能になります。*詳しくは、カタログ及びWebサイトをご参照ください。




◆◆ ラット-マウス間での仕様変更 ◆◆

ラット用からマウス用へ(マウス用からラット用へ)仕様を変更!

既にSR-5R/-6Rをお持ちで実験をマウスに変えたい場合や両方で使用したい場合は、MA-6N(マウス用頭部アダプター/補助イヤバー)をご購入頂き、取り換えて頂くだけでOK!もちろん逆も可能です。

SR-5M/-6Mをお持ちで実験をラットに変えたい場合や両方で使用したい場合は、RA-6N(ラット用頭部アダプター/補助イヤバー)をご購入頂き、取り換えて頂くだけでOK!

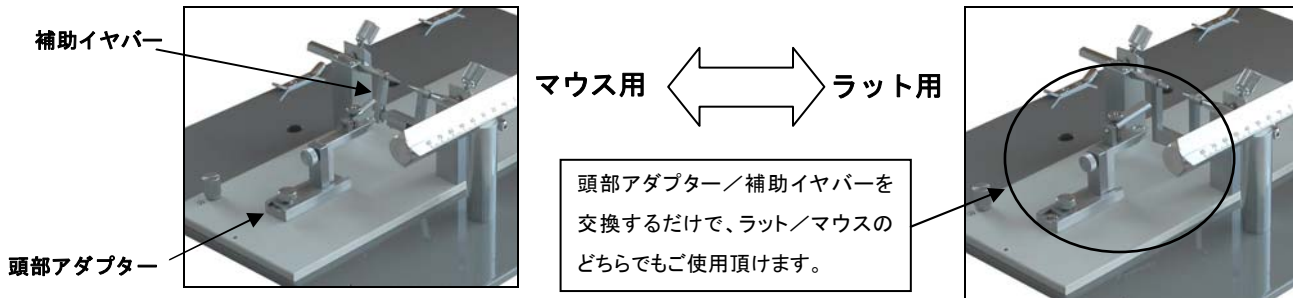


◆◆ MRI対応へバージョンアップ ◆◆

通常固定装置からMRI対応固定装置へバージョンアップ!

MRI測定を行いたい場合、頭部固定プレートをMRI実験用プレートへ取り替えるだけでOK!MRI測定時は、本器を取り外すことで100%プラスチックになりMRI測定が可能になります。

ラット用 → SRP-AR

マウス用 → SRP-AM

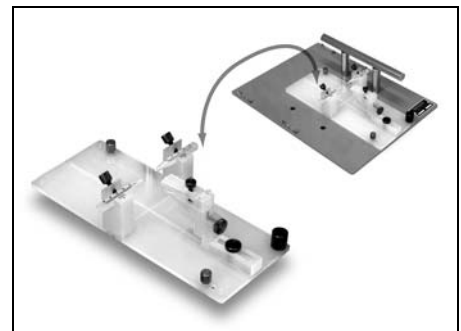

ナリシゲカスタマーサポートセンター

TEL: (+81) 03-3308-8232

E-MAIL: sales@narishige.co.jp