


SR-9M 関連機器の組み合わせ例


NARISHIGE WEB NEWS NO.073 にて新型脳定位固定装置(マウス / 慢性用)SR-9M を、NO.078 にて SR-9M と同時に使用することで、簡易に頭部固定を行い、又脳定位固定の状態に戻せる簡易頭部固定プレート(マウス用) MAG-1 をご紹介させていただきました。今回の WEB NEWS では、SR-9M 関連機器の組み合わせ例をご紹介します。

概要図

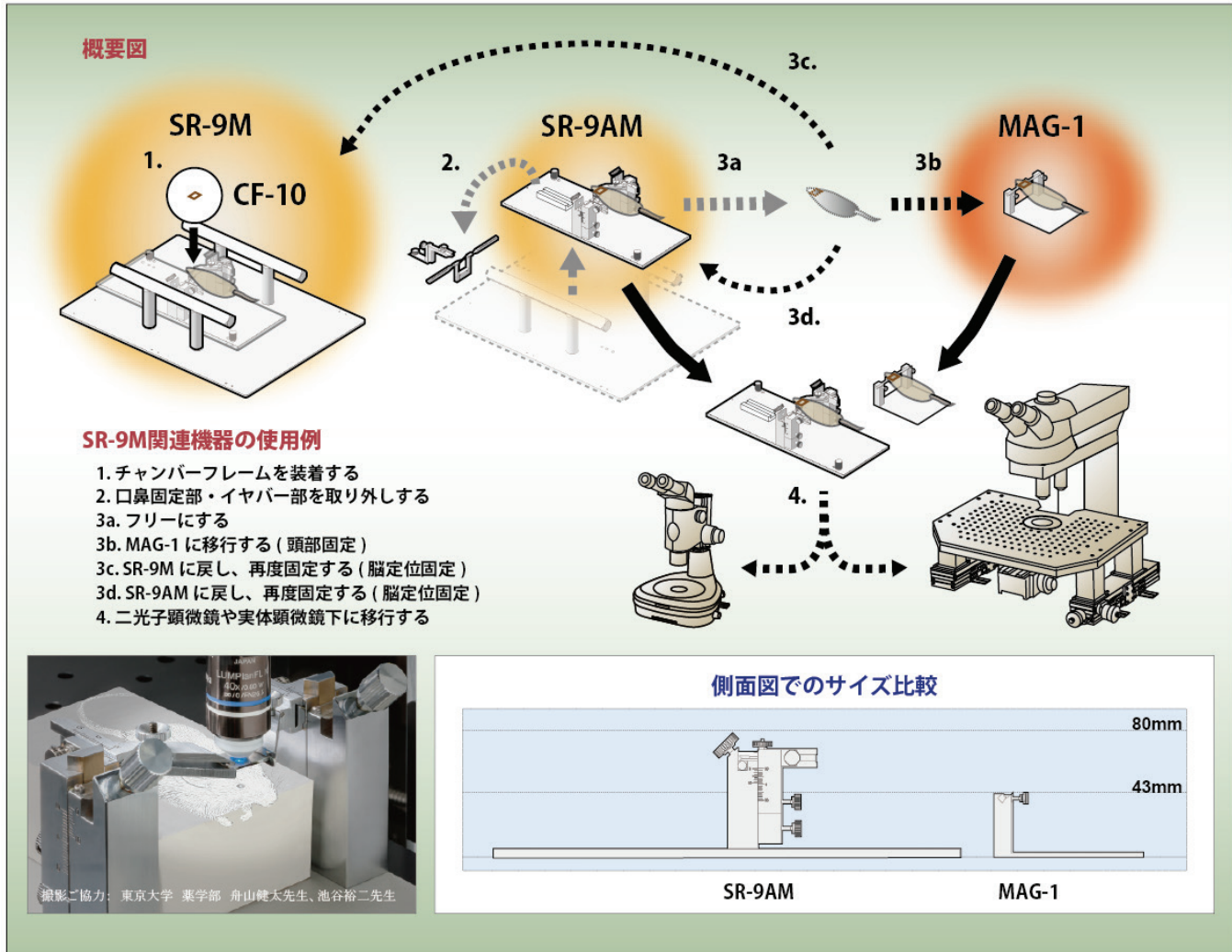

上図のように、最初に SR-9M にてチャンバーフレームを対象に接着することで、MAG-1 に移動してから戻しても再度脳定位固定状態にすることが出来ます。SR-9M からベースプレートを取り除いた状態が SR-9AM になりますが、MAG-1 は更に高さが低く、顕微鏡のステージに載せての観察などに特に力を発揮します。実験する場に合わせ MAG-1 を複数用意いただければ、セッティングの手間などを大幅に軽減いただけます。

更に実験に合わせた形に

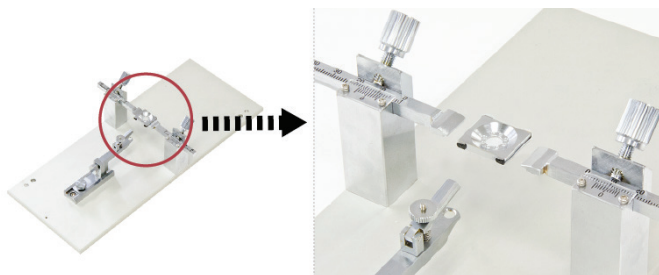

前回ご紹介しましたように、MAG-1 の高さを変更したりゴニオステージに搭載したりする他にも、対象に合わせた特注チャンバーやイヤバー作成のご要望にもお応えできます。

お気軽にご相談下さい。

ご不明な点等がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。